

# Définitions des principaux pictogrammes des dispositifs médicaux (DM)

## Identification / Traçabilité



### Medical Device

> Précise qu'il s'agit d'un dispositif médical



### Identifiant Unique du DM

> Pour identifier le DM



### Référence catalogue du fabricant

> Pour identifier le DM



### Numéro de lot du fabricant

> Indispensable pour la traçabilité patient



**Numéro de série** (un numéro par DM – pour identifier certains DM spécifiques)



**Fabricant du DM** (accompagné du nom et de l'adresse du fabricant)

Ces informations sont nécessaires pour un signalement de matériovigilance, en complément du nom commercial du DM

## Matériaux



**Présence de la substance** « xxx » dans le dispositif



Présence de phtalates = PHT (perturbateurs endocriniens) accompagné du nom du phtalate (DEHP, BBP...)

> **A limiter pour les personnes à risque (enfants, femmes enceintes/allaitantes...)**



Présence de latex (caoutchouc naturel)

> **Vérifier l'absence d'allergie**



**Absence de la substance** « xxx » dans le dispositif


## Conservation



**Tenir à l'écart de la lumière** du soleil ou d'autres sources lumineuses



**Fragile**, à manipuler avec précaution

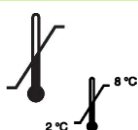

### Limites de température de stockage

Ex : limites haute et basse indiquées, ici stockage réfrigéré entre 2 et 8 °C.



**Conserver au sec**

## Utilisation



### Date de péremption

> **A contrôler avant utilisation** (si format AAAA-MM : utilisable jusqu'à la fin du mois indiqué)



### Ne pas réutiliser, usage unique :

conçu pour une utilisation (ou une utilisation lors d'une procédure sur un seul patient)



### Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert

> **Vérifier l'intégrité de l'emballage avant l'utilisation**



**Avertissement** : précautions ou restrictions d'utilisation

> **Consulter la notice**



**Consulter le manuel** ou le mode d'emploi

## Stérilité



DM n'ayant pas été sujet à un procédé de stérilisation



DM ne devant pas être re-stérilisé



DM stérilisé à l'oxyde d'éthylène



DM stérilisé par la chaleur



DM stérilisé par irradiation

## Fabrication/Réglementaire



**Date de fabrication du DM** (AAAA/MM)



**Conforme aux Directives Européennes** (marquage CE) avec numéro d'identification SGS (organisme notifié).